

Rekonditioneringsanvisning

Model No. 815430, 815440, 815450

Art. No.105064R-D, 2024-04-02

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta gåbordet används och vilken påfrestning det har utsatts för.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

För att säkerställa en trygg och säker produkt skall endast originaldelar användas. Produktgarantin och CE-märkningen är ogiltiga om otillåtna reservdelar har använts på produkten.

Rengöring

Gåbordet kan rengöras med en fuktig trasa. Vid ansamling av lera och smuts kan en trasa med ett mildt tvättmedel användas följt av sköljning med ljummet vatten. Undvik att spola direkt mot kullager (i hjul och framgafflar) vid användning av högtryckstvätt. Använd inte slipmedel eller ångtvätt. Torka av gåbordet med en mjuk trasa. Vid rengöring i automatiska tvättsystem gäller följande: Tvätt; 60°C, 10 min (tryck max 4 bar, pH-neutral) - torkning; 70°, 10 min.

Desinfektion

Desinfektion får endast utföras av behörig personal. Under desinfektion måste tillräcklig skyddsutrustning bäras och instruktionerna från desinfektionsmedelstillverkaren måste följas. Gåbordets yta ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel/-metoder som innehåller klor eller fenol. Använd inte värmedesinfektion.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

☐ **Hjul**

- Kontrollera att hjulen ej är skadade och att de snurrar lätt utan oljud.
- Kontrollera att hjulen är ordentligt fastsatta
- Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsnings som förstörs när de demonteras.

☐ **Gaffel**

- Kontrollera att framgaffel sitter fast ordentligt och att den kan rotera.
- Mutter och skruv som fäster gaffel till hjul får ej röras. Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsnings som förstörs när de demonteras.

☐ **Bromsar**

- Kontrollera att både färd- och parkeringsbromsar tar jämnt och ordentligt.
- Efterjustera och rengör bromsklossar samt bromsfjädar vid behov.
- Kontrollera att det inte är några skador på bromsvajer.

☐ **Handtag**

- Kontrollera att handtag ej är skadat och att det sitter fast ordentligt i korrekt position.
- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt.
- Kontrollera att låsratten som håller handtagen sitter ordentligt i aluminiumprofilen.

☐ **Sits**

- Kontrollera att sits ej är skadad.

☐ **Armstödsdynor**

- Kontrollera att armstöden är fria från defekter och skador.
- Kontrollera att justering av armstöd kan ske utan problem.

☐ **Fällmekanism**

- Kontrollera att fällningen går lätt och att låsningen fungerar i utfälld position.
- Kontrollera att transportlåset sitter ordentligt i ihopfälld position.

☐ **Ram / Chassi**

- Kontrollera att inga mekaniska skador finns på chassit.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Vid demontering av skruv mellan ram och kryss: skruven måste ersättas med en ny då den innehåller en självlåsnings som förstörs när den demonteras (reservdelskit 816083).

☐ **Produktetikett**

Kontrollera att etiketten med CE-märkningen finns kvar, sitter ordentligt och att den går att läsa.

☐ **Reflexer**

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

☐ **Provkörning**

- Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.
- Kontrollera att rullatorn känns stabil och är enkel att manövrera utan oljud.
- Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Modell: _____

Serienummer: _____

Ägare: _____

Åtgärdad av: _____

Ort och datum: _____

Anmärkning/Anmärkningar:

Sprängskiss

815430 TOPRO Troja Walker² M

815440 TOPRO Troja Walker² S

815450 TOPRO Troja Walker² X

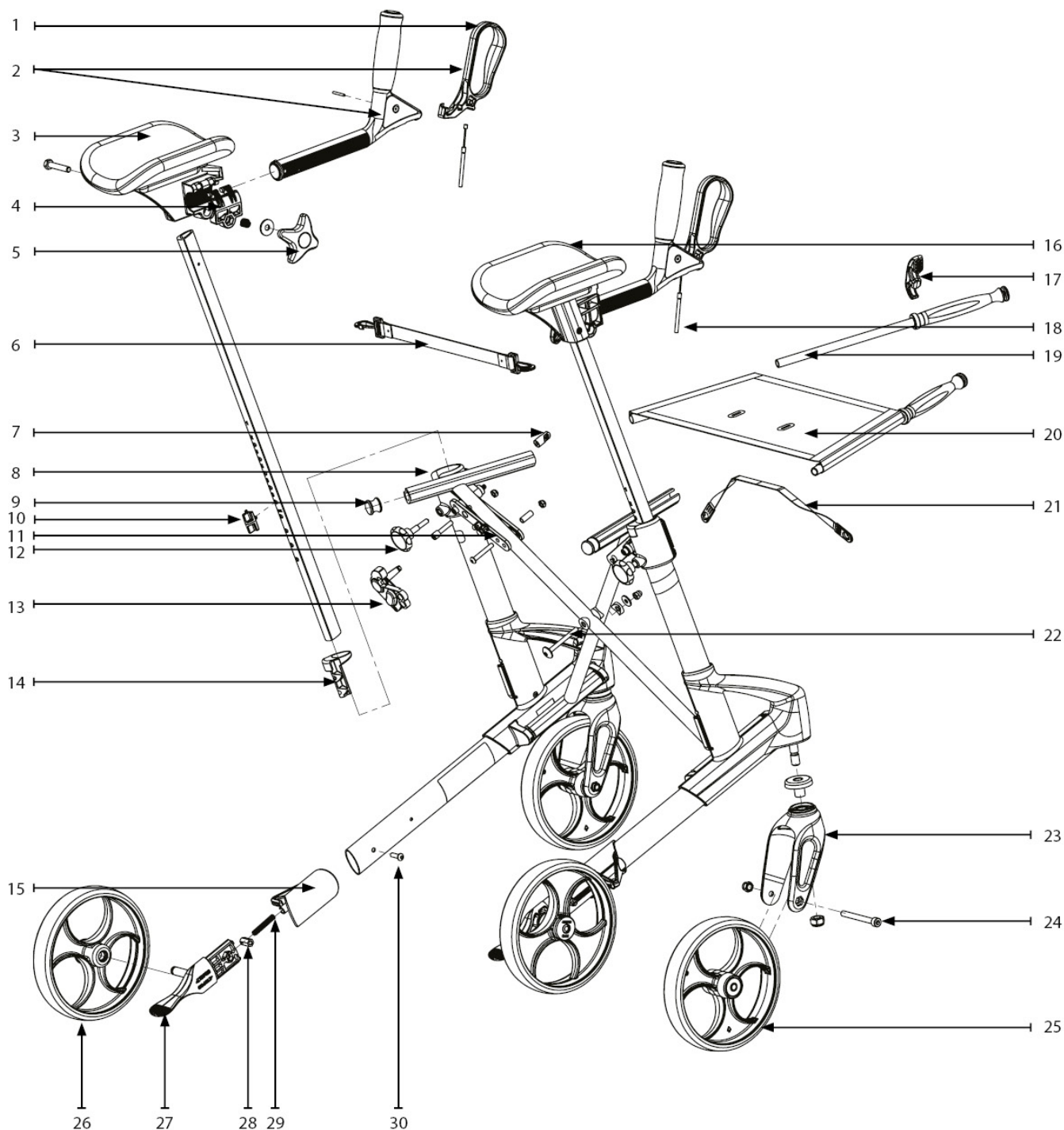


Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
1	815232	Bromshandtag
2	815229	Handtag komplett inkl. bromshandtag, storlek M/S
	815217	Handtag komplett inkl. bromshandtag, storlek X
3	815869	Underarmstöd med armkudde och rör, vänster, storlek M
	815872	Underarmstöd med armkudde och rör, vänster, storlek S
	815875	Underarmstöd med armkudde och rör, vänster, storlek X
4	815224	Klämma för handtag
5	815223	Låsratt till handtag
6	814017	Anslutningsrem, storlek M/S
7	816083	Kryssinfästning
8	815335	Övre kryssfäste, vänster
	815334	Övre kryssfäste, höger
9	815269	Bakre fäste för sits, par
10	815359	Minnesklämma
11	716702	Parallellstag, storlek M/S
12	815892	Låsratt med reflex, grå
	814623	Låsratt med reflex, svart
13	814727	Låsningsmekanism
14	815383	Fäststycke
15	815340	Bromskloss
16	815870	Underarmstöd men armkudde och rör, höger, storlek M
	815873	Underarmstöd men armkudde och rör, höger, storlek S
	815876	Underarmstöd men armkudde och rör, höger, storlek X
17	815310	Låshake / transportlås
18	814020	Bromsvajer, storlek M
	814137	Bromsvajer, storlek S/X
19	814791	Sitsstag
20	814759	Sits, storlek M/S
	814134	Sits, storlek X

Rekonditioneringsanvisning
Model No. 815430, 815440, 815450
Art. No.105064R-D, 2024-04-02

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
21	814150	Rem för ihopfällning, storlek M/S
	814151	Rem för hopfällning, storlek X
22	814778	Kryssbolt
23	815371	Gaffel
24	815831	Hjulskruv - fr. o. m. serienummer 0000229728 001 (oktober 2023)*
	815399	Hjulskruv**
25	816022	Framhjul, st - fr. o. m. serienummer 0000229728 001 (oktober 2023)*
	815372	Framhjul, st**
26	816023	Bakhjul, st - fr. o. m. serienummmmer 0000229728 001 (oktober 2023)*
	815373	Bakhjul, st**
27	815329	Bakhjulssats / steghjälp
28	716520	Fäste för bromsvajer
29	815360	Bromsfjäder
30	101362	Skruv, M6 x 20 mm

	Ny design (oktober 2023)* fr. o. m. SN 0000229728001	Tidigare design**
Framhjul		 
Bakhjul		 