

Rekonditioneringsanvisning

Model No. 815400, 815410, 815420

Art. No.105032R-H, 2025-02-11

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta rollatorn används och vilken påfrestning den har utsatts för.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

För att säkerställa en trygg och säker produkt skall endast originaldelar användas. Produktgarantin och CE-märkningen är ogiltiga om otillåtna reservdelar har använts på produkten.

Rengöring

Rollatorn kan rengöras med en fuktig trasa. Vid ansamling av lera och smuts kan en trasa med ett mildt tvättmedel användas följt av sköljning med ljummet vatten. Undvik att spola direkt mot kullager (i hjul och framgafflar) vid användning av högtryckstvätt. Använd inte slipmedel eller ångtvätt. Torka rollatorn med en mjuk trasa. Vid rengöring i automatiska tvättssystem gäller följande: Tvätt; 60°C, 10 min (tryck max 4 bar, pH-neutral) - torkning; 70°, 10 min. Låt rollatorn svalna i rumstemperatur före användning.

Desinfektion

Desinfektion får endast utföras av behörig personal. Under desinfektion måste tillräcklig skyddsutrustning bäras och instruktionerna från desinfektionsmedelstillverkaren måste följas. Rollatorns yta ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel/-metoder som innehåller klor eller fenol. Använd inte värmedesinfektion.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

☐ **Hjul**

- Kontrollera att hjulen ej är skadade och att de snurrar lätt utan oljud.
- Kontrollera att hjulen är ordentligt fastsatta
- Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsningsmekanism som förstörs när de demonteras.

☐ **Gaffel**

- Kontrollera att framgaffel sitter fast ordentligt och att den kan rotera.
- Mutter och skruv som fäster gaffel till hjul får ej röras. Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsningsmekanism som förstörs när de demonteras.

☐ **Bromsar**

- Kontrollera att både färd- och parkeringsbromsar tar jämnt och ordentligt.
- Efterjustera och rengör bromsklossar samt bromsfjädrar vid behov.
- Kontrollera att det inte är några skador på bromsvajer.

☐ **Handtag**

- Kontrollera att handtag ej är skadat och att det sitter fast ordentligt i korrekt position.
- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt.
- Kontrollera att minnesstycket är inställt för maximal handtagshöjd (nedersta hålet i handtagsröret).
- Kontrollera att låsratten som håller handtagen sitter ordentligt i aluminiumprofilen (gäller ej modeller med ny höjdjustering*).

☐ **Sits**

- Kontrollera att sits ej är skadad.

☐ **Fällmekanism**

- Kontrollera att fällningen går lätt och att låsningen fungerar i utfälld position.
- Kontrollera att transportlåset sitter ordentligt i ihopfälld position.

☐ **Ram / Chassi**

- Kontrollera att inga mekaniska skador finns på chassit.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Vid demontering av skruv mellan ram och kryss: skruven måste ersättas med en ny då den innehåller en självlåsningsmekanism som förstörs när den demonteras.

☐ **Produktetikett**

Kontrollera att etiketten med CE-märkningen finns kvar, sitter ordentligt och att den går att läsa.

☐ **Reflexer**

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

☐ **Provkörning**

- Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.
- Kontrollera att rullatorn känns stabil och är enkel att manövrera utan oljud.
- Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Modell: _____

Serienummer: _____

Ägare: _____

Åtgärdad av: _____

Ort och datum: _____

Anmärkningar/Anteckningar:

Sprängskiss

815400 TOPRO Troja Original M

815410 TOPRO Troja Original S

815420 TOPRO Troja Original X

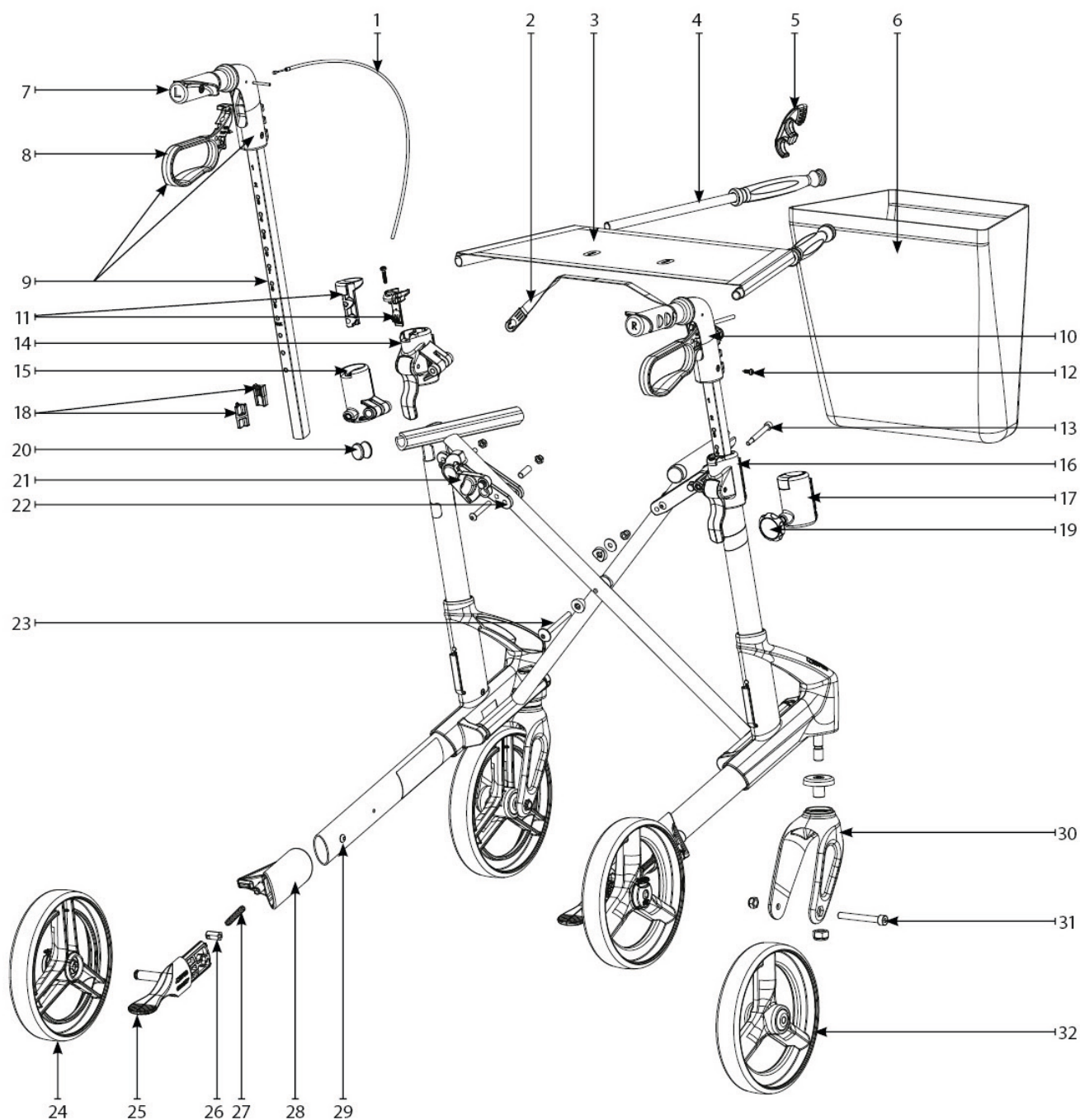


Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
1	814792	Bromsvajer och fjäder, st. (för storlek M/S)
	814131	Bromsvajer och fjäder, st. (för storlek X)
2	814150	Rem för hopfällning (för storlek M/S)
	814151	Rem för hopfällning (för storlek X)
3	814759	Sits (för storlek M/S)
	814134	Sits (för storlek X)
4	814791	Sitsstag lång (för variant 110300, 110301, 110302, 110303, 110304, 110700, 110701, 110704, 111300, 111301, 111304, 111700, 111701, 111704, 112301, 112304, 112700, 112701)
	815888	Sitsstag kort (för variant 110200, 110201, 111200, 111201)
5	815310	Låshake / transportlås (för variant 110300, 110301, 110302, 110303, 110304, 110700, 110701, 110704, 111300, 111301, 111304, 111700, 111701, 111704, 112301, 112304, 112700, 112701)
	815280	Låshake / transportlås (för variant 110200, 110201, 111200, 111201, 112201)
6	815237	Korg, för storlek M/S
	814129	Korg, för storlek X
	816032	Korg, för storlek M/S (för modeller med ny höjdjustering***)
	816033	Korg, för storlek X (för modeller med ny höjdjustering***)
7	814680	Grepp anatomiskt, par
8	815232	Bromshandtag, st.
9	815806	Handtag, komplett, vänster, för storlek M
	815808	Handtag, komplett, vänster, för storlek S
	815866	Handtag, komplett, vänster, för storlek X
	816040	Handtag, komplett, vänster, för storlek M (för modeller med ny höjdjustering***)
	816042	Handtag, komplett, vänster, för storlek S (för modeller med ny höjdjustering***)
	816044	Handtag, komplett, vänster, för storlek X (för modeller med ny höjdjustering***)
10	815807	Handtag, komplett, höger, för storlek M
	815809	Handtag, komplett, höger, för storlek S
	815867	Handtag, komplett, höger, för storlek X
	816041	Handtag, komplett, höger, för storlek M (för modeller med ny höjdjustering***)
	816043	Handtag, komplett, höger, , för storlek S (för modeller med ny höjdjustering***)
	816045	Handtag, komplett, höger, för storlek X (för modeller med ny höjdjustering***)

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
11	815383	Fäststycke, grått
	816038	Fäststycke, grått (för modeller med ny höjdjustering***)
12	104788	Skruv till handtag
13	816083	Kryssinfästning (ej för modeller med ny höjdjustering***)
14	816034	Höjdjusteringsmekanism***, vänster
15	815335	Övre kryssfäste, vänster, grå
16	816035	Höjdjusteringsmekanism***, höger
17	815334	Övre kryssfäste, höger, grå
18	815359	Minnesstycke
	816050	Minnesstycke (för modeller med ny höjdjustering***)
19	815892	Låsraff med reflex, grå
	814623	Låsraff med reflex, svart
20	815269	Bakre fäste för sits, par
21	814727	Låsningsmekanism
22	815840	Parallellstag, för storlek M/S
23	814778	Kryssbult
24	816023	Bakhjul, st. - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
	815373	Bakhjul, st.**
25	815329	Bakhjulssats / steghjälp, st.
26	716520	Fäste för bromsvajer
27	815360	Bromsfjäder
28	815340	Bromskloss, grå
29	101362	Skruv, M6 x 20 mm
30	815371	Framgaffel, grå
31	815831	Hjulskruv - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
	815399	Hjulskruv**
32	816022	Framhjul, st. - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
	815372	Framhjul, st.**

Hjul

	Ny design (oktober 2023)* fr. o. m. SN 0000229728001	Tidigare design**
Framhjul		 
Bakhjul		 

Ny höjdjustering

***Variantnummer för modeller med ny höjdjustering		
Modellnamn	Modellnummer	Variantnummer
Troja Original M	815400	110700, 110701, 110704
Troja Original S	815410	111700, 111701, 111704
Troja Original X	815420	112700, 112701

